

Diagrama de secuencia de las diferentes pantallas de la aplicación:

## Pantalla Inicial:

Inicio

Jugar

Opciones

Salir



Al pulsar Jugar o configuracion se lanza la ventana de configuración para acceder al juego. Al pulsar salir se cierra la aplicación. Al pulsar el botón de volver se accede a la ventana de selección de paciente.

## Pantalla Selección de Paciente:

Seleccione un Jugador

Pepe Pérez Fernández

Alfredo González Ristre

Damáso Orgullosa de la Torre

Nuevo Jugador  
X Y Z

Guardar













Si se teclea un nombre aparece como Nuevo Jugador, si se pulsa "Guardar" se almacena en la lista superior.

Si se pulsa sobre un nombre se selecciona y al pulsar "→" se regresa hasta la pantalla de inicio.

## Pantalla Configuración:

### Configuración

Numero de Sesiones a realizar		50	
Duración de cada Sesión (minutos)		50	
Segundos por Globo		50	
Tiempo de descanso entre sesiones		50	
<div></div>			

Si se pulsa "<--" se regresa a la pantalla de Inicio

Si se pulsa "-->" se carga la pantalla del juego que se haya elegido anteriormente


Si se pulsa "+" se incrementa el contador de cada parámetro y con "-" se decrementa.

## Pantalla Juego:

Tiempo Restante 1:25

Aciertos 8

Fallos 3

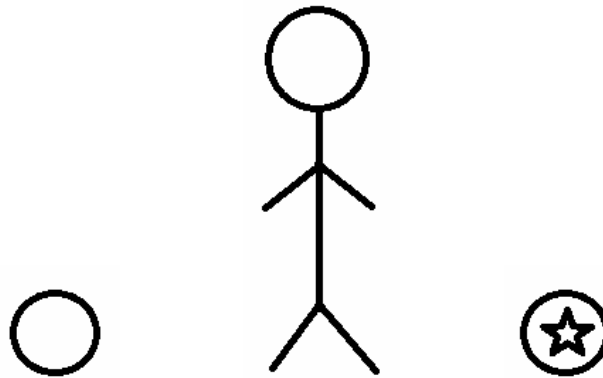

Una vez se acaba el juego se carga la pantalla de estadísticas.

## Pantalla Estadísticas:

### Estadísticas

Tiempo Jugado	30 minutos
Aciertos	3
Fallos	1
Tiempo Medio Realización Ejercicio	5 minutos
Tiempo Medio Reacción	10 segundos



Si se pulsa "→" se vuelve a la pantalla Inicial.